


## BOWIDIC TEST PAKETİ

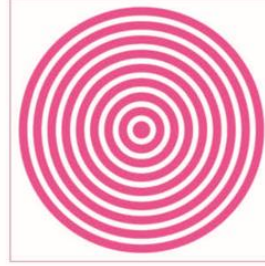

Bowie Dick Test Packs

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Avrupa Standardı EN 285'te bahsedildiği gibi her otoklavda günlük buhar penetrasyon testi yapılmalıdır. Bu amaçla Bowie&Dick Otoklav Test Paketi geliştirilmiştir. Bu testin gösterge sayfası, açık maviden koyu bir renge renk değişimini garanti eder ve net bir yoruma olanak tanır. Test Paketi, ISO 11140-1 (sınıf 2 + 4), EN 867-4 ve ISO 11140-4 ile uyumludur.

Mürekkep, her zaman tamamen aynı miktarda mürekkebin kullanılmasını sağlayan serigrafi baskı yoluyla test yaprağına uygulanır. Test sayfası, herhangi bir mürekkebin çıkmasını önlemek için lamine edilmiştir. Tüm Bowie & Dick Tipi Otoklav Test Paketlerinin üretimi, şartlandırılmış koşullar altında otomatikleştirilmiş bir süreçtir. Avantajları, paketlerin tamamen yeniden üretilebilir olması ve sterilizasyon döngüsünden sonra test sayfasının düz kalmasıdır. Bu ürün için tam uygunluk sertifikası verilmiştir.

KODE	ÜRÜN ADI	ÖZELLİKLER
ZEO-BW1	BOWIDIC TEST PAKETİ	200 Yaprak
ZEO-BW1	BOWIDIC TEST PAKETİ	400 Yaprak